

# ACTIMATT

TECHNOLOGIE D'ACTICOM

ACTIVATION DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE  
AVEC ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR

## 1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ces instructions doivent être lues dans leur intégralité avant la mise en service et l'utilisation de l'ACTIMATT. Ils doivent être conservés pour référence ultérieure. En cas de dommages causés au produit, aux biens ou aux personnes par le non-respect de ces instructions, la garantie expire.

### NOTE POUR LE PERSONNEL MÉDICAL

- L'ACTIMATT sert uniquement à soutenir le personnel infirmier, mais ne le remplace pas.
- Avant chaque utilisation, l'ACTIMATT doit être vérifié pour s'assurer de son bon fonctionnement.
- L'utilisation de l'Actimattsensor est l'une des "mesures de restriction des mouvements" et son utilisation doit être effectuée conformément aux spécifications des "mesures de restriction des mouvements".
- L'appareil n'est installé que par du personnel qualifié.

## 2 DESCRIPTION DU PRODUIT


### 1 ACTIMATT-MATELAS

Incluant l'incontinence et la housse de protection en coton. Les désignations S et M sont indiquées sur le matelas et sur la housse d'incontinence. La désignation **M** indique le côté moyennement dur du matelas, la désignation **S** le côté souple et doux du matelas

#### 1.1 CONNEXION ÉMETTEUR RADIO

La connexion pour l'émetteur est située dans la première ouverture latérale du matelas ACTIMATT

1  
Actimatt-  
Matelas

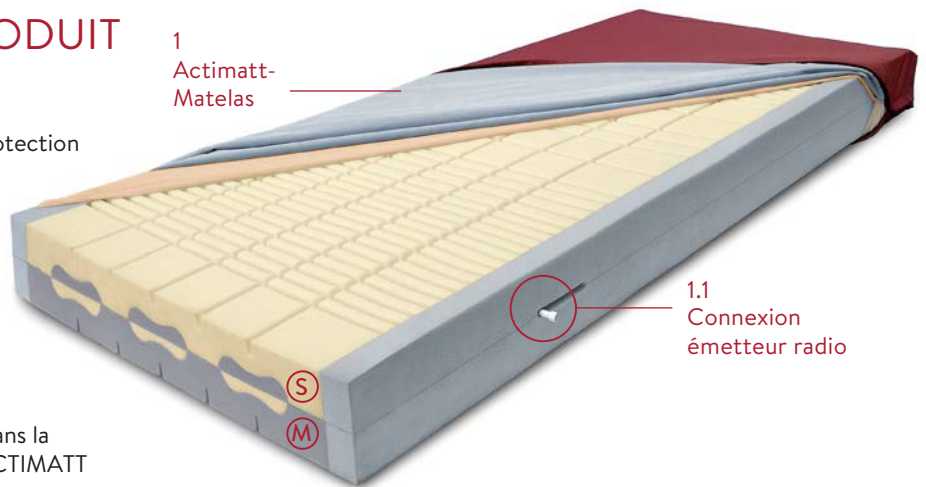

1.1  
Connexion  
émetteur radio

2  
Mallette  
d'activation



2.1  
Récepteur Radio



2.2  
Émetteur Radio



### 2 VALISE D'ACTIVATION

Mallette avec émetteur et récepteur pour l'activation du système. L'étui est muni d'un numéro de série sur le rabat droit.

#### 2.1 RÉCEPTEUR RADIO

RC07 Récepteur radio avec connexion pour le système d'appel.

**Option:** avec bloc d'alimentation sur câble spiralé. Le récepteur radio est muni d'un numéro de série sur le côté.

#### 2.2 ÉMETTEUR RADIO

L'émetteur radio doit être fixé au matelas ACTIMATT (connexion de l'émetteur radio) pour activer le système. L'émetteur contient une pile CR2032 de 3V. Le numéro de série se trouve sur le boîtier de protection de l'émetteur radio.

## 3 MISE EN ŒUVRE / ACTIVATION

### 3.1 CONTRÔLE D'EXHAUSTIVITÉ

Tout d'abord, assurez-vous que le système est complet. Pour ce faire, passez en revue les éléments du **point 2**. Les images sont fournies à des fins d'illustration.

Veillez vérifier **URGEMENT** si le numéro de série de tous les composants (boîtier, récepteur radio, émetteur radio et si disponible: Care function switch) correspondent l'un à l'autre.

**Attention:** si les numéros de série ne correspondent pas, le système **ne fonctionnera pas**.


### 3.2 CONNEXION À L'ÉMETTEUR

Ouvrez la housse du matelas et la housse de protection en coton de manière à pouvoir atteindre facilement la (première) ouverture du capteur sur le côté du matelas ACTIMATT. La connexion de l'émetteur radio (1.1) est située dans la (première) ouverture du capteur.

Ouvrez maintenant le boîtier d'activation et sortez l'émetteur radio (2.2). Poussez les trois bouchons de la fiche de l'émetteur vers l'arrière de manière à voir le sceau rouge sur la fiche de l'émetteur.



Branchez maintenant l'émetteur radio (2.2) sur le connecteur de l'émetteur radio (1.1). Faites attention à l'ajustement de la prise et pressez-les ensemble jusqu'à la butée.

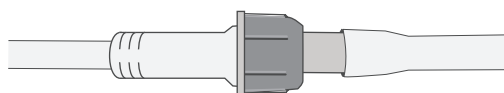

Ensuite, fermez le bouchon rotatif de la fiche de l'émetteur.

### 3.3 CONNEXION AU RÉCEPTEUR

Sortez le récepteur radio (2.1) de l'étui. Connecter le récepteur radio au système d'appel.

**Option avec bloc d'alimentation:** Branchez le bloc d'alimentation situé à l'extrémité du câble spiralé à une prise de courant. Dès que le voyant gauche du récepteur radio s'allume en vert en permanence, le système est activé.

**Attention:** Veillez à ce que la fiche du récepteur radio/ système d'appel infirmière (éventuellement aussi la prise de courant) soit placée hors de portée et éventuellement aussi hors de vue du patient / résident.

### 3.4 FONCTION - CONTRÔLE


Pour effectuer le contrôle de fonctionnement, placez un poids sur le matelas ACTIMATT, par exemple en vous asseyant dessus.

La charge doit être appliquée pendant au moins 3 secondes. Ensuite, le matelas peut être laissé (soulagement du poids) et un signal d'appel est envoyé au système d'appel.

Lorsque le signal d'appel a été affiché via le système d'appel, le système est activé et prêt à l'emploi.

#### AJOUT OPTIONNEL: INTERRUPTEUR DE FONCTION DE SOINS

Le bouton **OFF** (15 Min.) de l'interrupteur de la fonction de soins permet de désactiver la fonction d'appel du matelas Actimatt pendant 15 minutes.

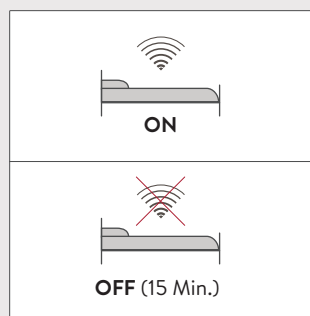

La fonction d'appel du matelas Actimatt est automatiquement réactivée après 15 minutes. Si nécessaire, la fonction d'appel peut être réactivée avant l'expiration des 15 minutes en appuyant sur le bouton **ON**.


L'arrière de l'interrupteur de la fonction de soins adhère magnétiquement et peut donc être placé sur le cadre de la porte du résident surveillé.

**Attention:** le numéro de série de l'interrupteur de la fonction d'entretien doit également être identique à celui des autres composants.

## 4 AIDE

Si le fonctionnement de l'ACTIMATT n'est pas garanti, vérifiez les étapes suivantes:

- Le récepteur radio est-il en fonctionnement (**Le signal I/O** est vert en permanence)?
- Le récepteur radio (2.1) est-il correctement connecté conformément au **Point 3.3**?
- L'émetteur radio (2.2) est-il correctement connecté conformément au **Point 3.2**?
- Faites les numéros de série de tous les composants (boîtier d'activation, récepteur radio, émetteur radio et si présent : Care function switch) correspondent entre eux?
- Vérifiez l'état de la batterie, remplacez-la si nécessaire (l'état de batterie faible est indiqué par le clignotement rouge du signal " Quit " sur le récepteur radio (2.1)).

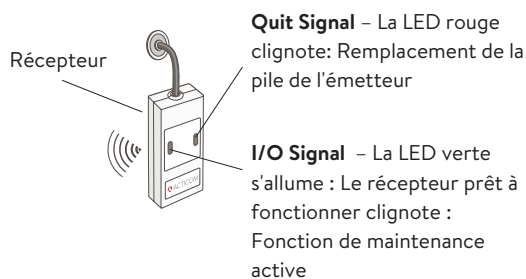

Si les points mentionnés sont remplis, mais que les fonctions de l'ACTIMATT ne sont toujours pas garanties, veuillez contacter le service technique.

## 5 CONSIGNES DE NETTOYAGE

- Le matelas ACTIMATT peut être nettoyé avec des désinfectants et des produits de nettoyage disponibles dans le commerce contenant au maximum 70% d'alcool par volume.
- N'utilisez pas d'agents corrosifs.
- Le matelas ACTIMATT peut être autoclavé et désinfecté à la vapeur. (Retirer au préalable l'émetteur radio du matelas).
- Conservez le matelas ACTIMATT au sec, propre et à plat entre 0°C et +55°C.
- La housse pour incontinence est lavable jusqu'à 95°C.