
ACTIMATT

TECHNOLOGIE VON ACTICOM

PFLEGEMATRATZE
MIT INTEGRIERTEM ALARMAUSLÖSER



ACTIMATT – DIE INNOVATIVE PFLEGEMATRATZE

Für Pflegeeinrichtungen, die grossen Wert auf Sicherheit, Druckentlastung und Sturzprophylaxe legen, ist Actimatt die optimale Lösung. Die einzigartige Pflegematratze mit integriertem Sicherheitssystem vereint in sich verschiedene Innovationen, welche massgeblich zur Verbesserung der Pflegequalität beitragen.



DEUTSCH | OKTOBER 2021

EINE MATRATZE – VIELE VORTEILE

VIELSEITIGE ANWENDUNG

- Einsetzbar als: Dekubitusprophylaxe, normale Matratze und Sturzüberwachungssystem
- Beidseitig nutzbar
- Geeignet für Patienten / Heimbewohner bis 150kg
- Für 90% aller Pflegebedürftigen anwendbar

KOSTENEFFIZIENZ


- Sehr langlebig und strapazierfähig
- Neu entwickelte Matratze für zufriedene Patienten und Heimbewohner
- Bettausstiegüberwachung nach Bedarf aktivierbar / nachrüstbar
- Kostenersparnis und Flexibilität im Matratzenmanagement
- Kein zusätzlicher Reinigungsaufwand
- Gute Garantieleistungen

HÖCHSTER KOMFORT

- Ideale Druckentlastung
- Optimales Bettklima
- Kein Körpergefühlsverlust
- Gute Stützkraft
- Wendematratze mit zwei verschiedenen Härtegraden: soft (S) und mittel (M)

HÖHERE PFLEGEQUALITÄT UND SICHERHEIT

- Schnelle Reaktionszeit
- Sicherheit durch Randzonenverstärkung
- Alarmmeldung, bevor der Patient aus dem Bett steigt
- Sehr einfache Inbetriebnahme
- Keine Stolperfallen (kabellos und in der Matratze integriert)

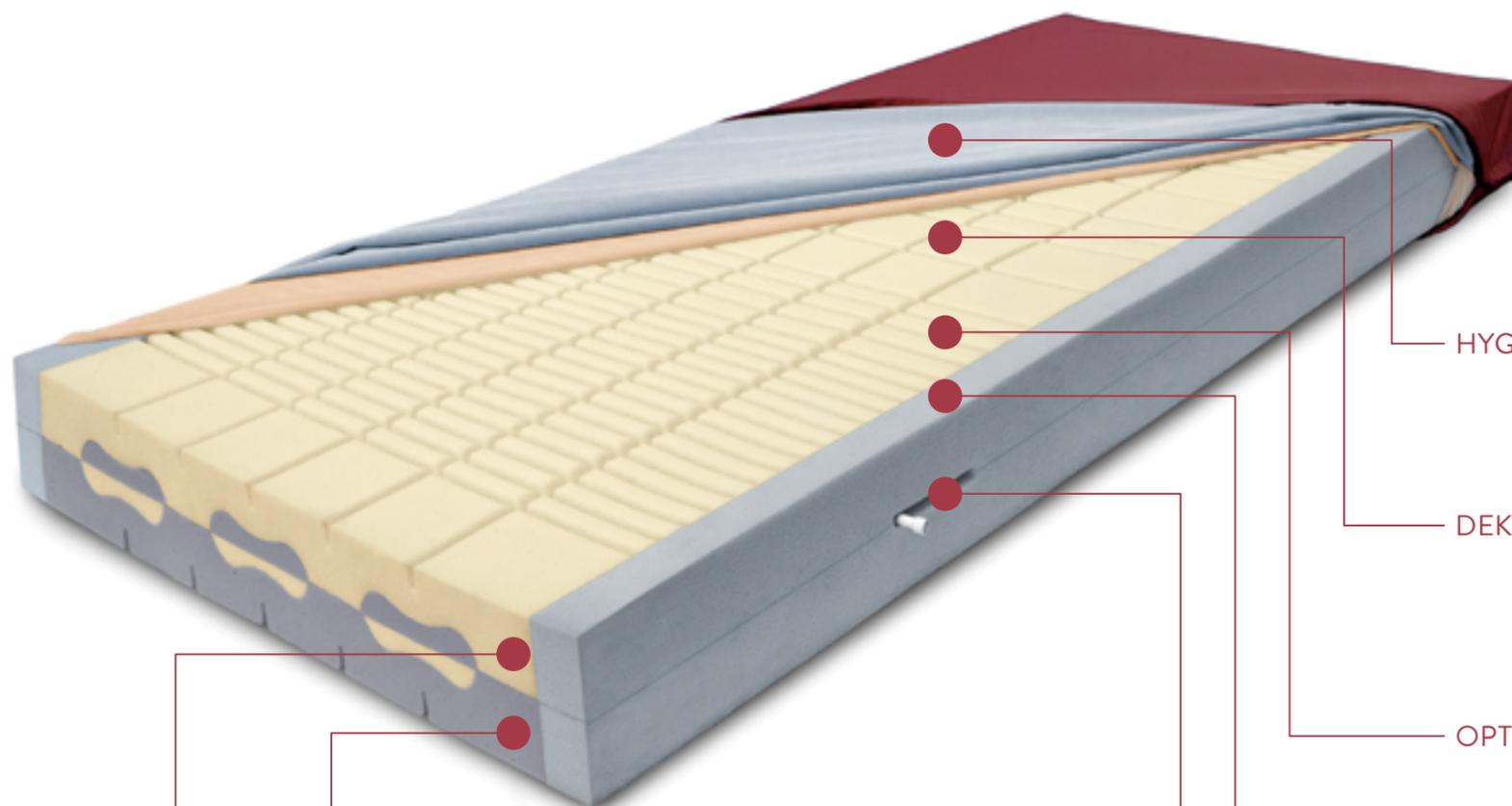

HYGIENE

Durch den Inkontinenz-Schutzbezug ist die Matratze vor Feuchtigkeit und organischen Flüssigkeiten geschützt. Der Bezug ist autoklavierbar und mit Dampf desinfizierbar.

DEKUBITUSPROPHYLAXE

Die Modellierung des Schaumstoffkerns garantiert eine optimale Druckentlastung. Für eine dynamische und komfortable Körperanpassung sorgen die Längs- und Querprofilierungen.

OPTIMALES BETTKLIMA

Die Durchlüftung des Matratzenkerns wird durch die vertikalen und horizontalen Belüftungskanäle gewährleistet. Dies führt zu einem angenehmen und trockenem Bettklima und somit zu weniger Schwitzen.

SICHERHEIT

Die Randzonenverstärkung sorgt für Stabilität und dient zudem als Aufstehhilfe.

INTEGRIERTER ALARMAUSLÖSER

Die Actimatt verfügt über eingebettete Sensoren, welche bei Bedarf aktiviert werden können. Das intelligente Sicherheitssystem löst den Alarm kabellos über Funk aus – egal in welcher Position sich das Bett befindet.

So funktioniert Actimatt

SO FUNKTIONIERT DAS ACTIMATT SICHERHEITSSYSTEM

Die intelligente Sensorik ist im Schaumstoff eingebettet. Bei Überwachungsbedarf kann das Sicherheitssystem durch das einfache Anbringen des Senders aktiviert werden. Sobald bei der Matratze ein ungewollter Bettausstieg erfasst wird, geht der Alarm kabellos per Funk an den Empfänger. Dieser löst unmittelbar den Alarm bei der Schwesternrufanlage aus.



WANN WIRD EIN RUF SIGNAL AUSGELÖST?




Wenn der Patient auf dem Bettrand sitzt



Wenn der Patient versucht, über das hochgezogene Bettgitter zu steigen



Wenn der Patient in das Bettgitter hineinrollt

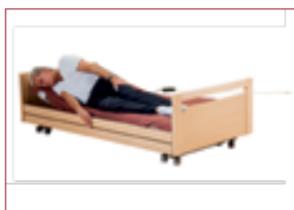

Wenn der Patient aus dem Bett zu fallen droht



Wenn der Patient versucht, über die Enden des Bettes zu steigen



Egal in welcher Position sich das Bett befindet, die Funktionen von Actimatt werden nicht beeinflusst

Technisches Datenblatt



Härtegrad:	weich (S) & mittel (M)
Dekubitusgrad:	bis 3
Patientengewicht:	bis 150 kg
Grösse Standard:	90 × 200 cm, alle Grössen erhältlich
Höhe:	14 / 15 cm
Matratzengewicht:	14 kg
Raumgewicht:	50 / 55 kg/m ³
Kern:	7-Zonen-Kaltschaum, VDV-Desinfektion bis 105 °C, FCKW – frei; 100 % sortenrein
Zertifiziert:	nach Öko-Tex Standard 100, Produktklasse I
Flammhemmend:	DIN 75200/ FMVSS 302 – erfüllt
Längskantenverstärkung:	55 kg/m ³
Handgriffe:	4 Stück, Bänderverstärkt
Aussenbezug:	PU-beschichtetes Baumwollgewebe 230 g/m ² Unterseite 100 % Baumwolle; Oberseite Polyurethan waschbar bis 95 °C, autoklavierbar, desinfizierbar, hochelastisch, strapazierfähig, nassdicht, atmungsaktiv, dampfdurchlässig, sowie säure- und basenbeständig
Innenhülle:	100 % Baumwolle
Qualität:	Swiss made; EN ISO 9001:2015; EN ISO 13485:2016; CE



Zubehör zu **Actimatt**



EMPFÄNGER LICHT

Damit beim Verlassen des Bettes die Nachttischlampe angeht.



FUNKSENDER FÜR BIRNTASTER (GLOCKE)

Bestehende Birntaster können mit Funksender ausgestattet werden für noch mehr Flexibilität.



ARMBANDSENDER

Als einfaches und mobiles Rufsystem.



ACTISIT

Kabelloses, intelligentes (Rollstuhl) Kissen mit integriertem Sensor, dass bei Verlassen der Sitzposition einen Alarm auslöst.



ACTILINK

Ein Notrufkissen, das speziell für Patienten mit körperlichen Einschränkungen und Koordinationsstörungen entwickelt wurde. Beim Betätigen des Kissens wird nicht nur der Alarm beim Pflegepersonal ausgelöst, sondern auch eine akustische Meldung gelöst, sodass der Patient informiert wird ob er den Alarm ausgelöst hat oder nicht.



ACTIDOOR - TÜRGRIFFSENSOR

Unsichtbares Türüberwachungssystem, welches den Alarm Kabellos über Funk auslöst.

Mit Leidenschaft für mehr **Lebensqualität**

Seit 2002 entwickelt und vertreibt die Acticom AG mit Sitz in Aesch (BL, Schweiz) hochwertige Sicherheitssysteme für die Pflege. Im Zentrum steht dabei die Steigerung der Lebensqualität der pflegebedürftigen Menschen wie auch des Pflegepersonals. Dieses Ziel erreichen wir dank höchsten Qualitätsansprüchen, engen Partnerschaften mit unseren Kunden, Lieferanten und nicht zuletzt dank langjähriger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Pflegeheimen und Spitälern.



ACTICOM | GEWERBESTRASSE 7, 4147 AESCH
+41 (0) 61 733 08 50 | INFO@ACTICOM.CH
WWW.ACTICOM.CH

